

INSTRUCTIONS IMPORTANTES À CONSERVER POUR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT



Le kit Power Grow Comb de Velform® comprend :

- A – Power Grow Comb : peigne haute technologie qui stimule la croissance du cheveu.
- B – Peigne de massage : peigne en caoutchouc relaxant, à utiliser sous la douche.
- C – Set de manucure : set de manucure pratique, idéal pour le voyage.
- D – Brosse : brosse professionnelle de salon.
- E – Instructions.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté ce peigne, à l'heure actuelle le plus avancé du marché, et destiné à favoriser la pousse des cheveux.

Lisez attentivement les instructions suivantes.

Informations relatives à Power Grow Comb by Velform®

Au moyen de la technologie et de la lumière infrarouge, Power Grow Comb by Velform® stimule les cellules du cuir chevelu, améliore la circulation sanguine et, grâce à l'association du laser et des voyants infrarouges, il nourrit les follicules pileux. Power Grow Comb by Velform® stimule également les follicules au moyen d'une technologie vibratoire. Ce traitement par vibrations, qui a été breveté, augmente le flux sanguin parvenant aux follicules, ce qui améliore la croissance capillaire.


Grâce au peigne incorporé, le laser et la lumière infrarouge pénètrent également dans les follicules, car les dents sont réparties autour du laser et des voyants, ce qui permet de séparer parfaitement les cheveux.

Grâce aux recherches scientifiques, à son design et à son système d'ingénierie, Power Grow Comb by Velform® stimule la croissance des cheveux.

INSTRUCTIONS


Mise en place des piles

1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles.
2. Placez quatre piles de type AAA (1,5 V), comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

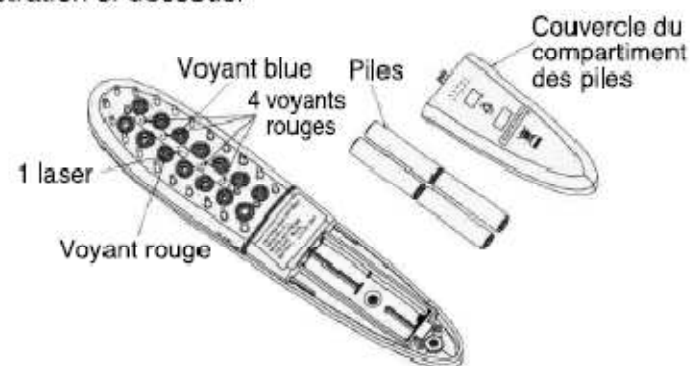

Mise en marche de Power Grow Comb by Velform®

Pour mettre Power Grow Comb by Velform® en marche, appuyez sur l'interrupteur situé près du logo. Un sifflement se fait entendre, et le voyant rouge de marche s'allume, ce qui indique que l'appareil est en marche.

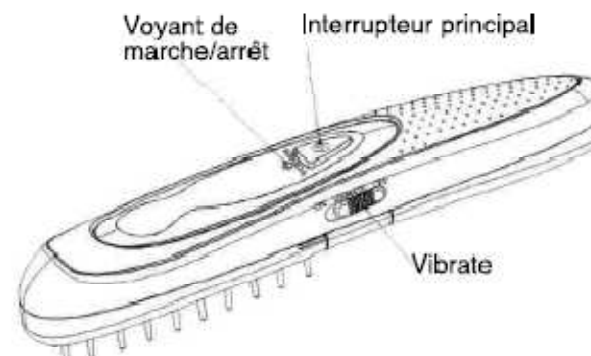


Activation du mode Vibrations

Power Grow Comb by Velform® comporte un mode Vibrations. Pour l'activer, placez l'interrupteur VIBRATE situé sur un côté sur la position ON (marche). Le mode Vibrations est activé. Remarque : le mode Vibrations fonctionne uniquement lorsque l'appareil est en marche.

Séparation du peigne

Si vous le souhaitez, vous pouvez séparer le peigne de l'appareil Power Grow Comb by Velform®. Pour cela, cherchez les marques sur les côtés du peigne, puis faites glisser ce dernier vers l'extérieur. Pour le remettre en place, remettez-le dans sa position d'origine et faites-le glisser vers l'intérieur jusqu'à entendre un clic.

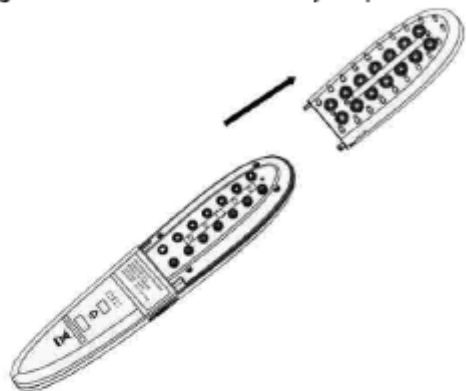

Mode d'emploi

Lorsque vous utilisez Power Grow Comb by Velform®, n'appliquez pas de lotion ni de gel sur vos cheveux.

Utilisez Power Grow Comb by Velform® un jour sur deux pendant 10 à 15 minutes. Vous obtiendrez les premiers résultats au bout de 8-12 semaines environ.


Passez lentement l'appareil sur le cuir chevelu dans le sens de la pousse des cheveux, c'est-à-dire du front vers la nuque et de haut en bas.

Faites en sorte de passer le peigne sur l'ensemble du crâne avec des mouvements lents et contrôlés.

Massage Comb

Massage Comb est spécialement conçu pour améliorer la circulation sanguine du cuir chevelu et stimuler la croissance du cheveu. Massage Comb peut être utilisé sur cheveux secs ou mouillés. Pour une plus grande revitalisation, appliquez votre shampooing à l'aide de Massage Comb. Placez vos doigts dans les orifices de Massage Comb (voir illustration).

Massez votre cuir chevelu avec Massage Comb en effectuant des mouvements circulaires et réguliers.

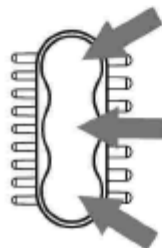

SPÉCIFICATIONS

Power Grow Comb by Velform® (modèle n° : WB/096)

Voltage d'entrée :

6 V DC (4 piles AAA)

Longueur d'onde du laser :

650 nm +/- 5 nm

Classe de laser :

4.5 mW Class 3R certified

Longueur d'onde de la lumière rouge :

660 nm +/- 5 nm

Longueur d'onde de la lumière bleue :

470 nm +/- 5 nm

Puissance :

420 mW sans vibrations

600 mW avec vibrations

Power Grow Comb by Velform® est conforme aux normes suivantes :

Certificat RoHS

Certification CE

EMC : EN 55014-1 et EN 55014-2

GARANTIE

Ce produit bénéficie d'une garantie contre les défauts de fabrication dont la durée est celle stipulée par la législation en vigueur dans chaque pays.

ATTENTION



POUR JETER LES MATÉRIAUX

Le symbole d'un conteneur à roulettes barré indique que vous devez vous informer et respecter les règlements locaux indiquant comment jeter ce type de produits.

Ne jetez pas ce produit avec vos résidus généraux.

Vous devez respecter les règlements locaux en la matière. Les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses ayant des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine, c'est pourquoi ils doivent être recyclés de façon appropriée.

Industex, S.L.

Avda. dels Països Catalans, 34-36-38; 8^a planta
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelone, Espagne)

Made in China